



DIE STÄRKSTE DIODENLASER- TECHNOLOGIE



TECHNISCHE DATEN

Temperatur der Hautkontaktkühlung	0° bis 3° C
Geräteabmessungen (H x B x T)	110 cm x 45 cm x 57 cm
Gewicht	50,5 kg
Umgebungsbedingungen	15° bis 28° C / 0 bis 90 % Luftfeuchtigkeit / 90 bis 110 KPa
Lasertyp	4 gemäß EN 60825-1

Modell	Spotgröße	Wellenlänge	Maximale Fluenz	Impulslänge
Single	1,2 cm ² 11 x 11 mm	810 nm	40 J/cm ²	8 bis 400 ms
Dual	2,0 cm ² 13,5 x 15 mm	810 nm	40 J/cm ²	8 bis 400 ms
Quad	3,7 cm ² 14,5 x 25,5 mm	810 nm	40 J/cm ²	8 bis 400 ms
3 Wellenlängen	0,81 cm ² , 2,0 cm ² , 3,7 cm ²	810, 940, 1060 nm	40 J/cm ²	8 bis 400 ms

Das Unternehmen Leaseir Technologies ist eines der führenden Unternehmen für Laser-Haarentfernung und verfolgt das Ziel: hochmoderne und leistungsstarke Geräte für Dermatologie und Kosmetik zu entwickeln, mit denen hervorragende Ergebnisse erzielt werden können, die sich Kundinnen und Kunden wünschen. Dabei steht Qualität für Leaseir an erster Stelle! Produziert wird nach strengen Qualitätsstandards in Europa. Die Geräte werden weit über das erforderliche Mass an medizinischen Tests hinaus geprüft.

Exklusiver Vertrieb für die Schweiz:

swiss beauty point

swiss beauty point | Tobas GmbH
Grindelstrasse 12 | 8303 Bassersdorf | Tel. 044 803 22 11
www.swissbeautypoint.ch | office@tobas.ch

Leaseir MHR Xcell Laser

DIE STÄRKSTE LASER TECHNOLOGIE

EXKLUSIVER VERTRIEB FÜR DIE SCHWEIZ:




by swiss beauty point



TECHNOLOGIE

SO EFFIZIENT WIE NOCH NIE!

Tatsächliche Fläche pro Sek.:

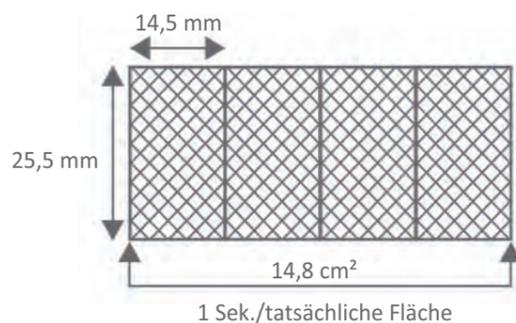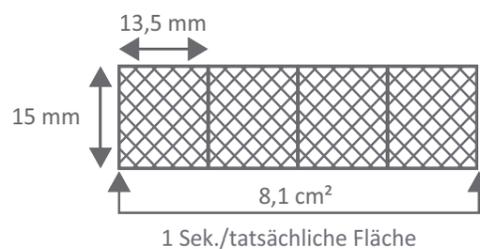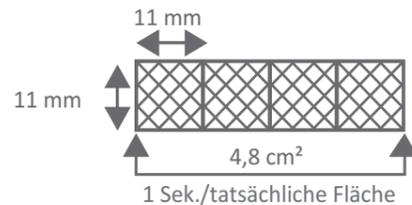

Stellt andere Laser in den Schatten

Der Leaseir Diodenlaser bietet derzeit eine der besten Leistungen am Markt. In Zahlen heißt das: 40 J/cm² + 4 Hz + 30 ms. So können Sie sich über exzellente Ergebnisse freuen.

Mehr Behandlungen in kürzerer Zeit

Arbeiten bei 4 Hz (4 Impulse pro Sekunde) bei konstant starker Leistung von bis zu 40 J/cm². So lassen sich auch große Hautflächen in deutlich kürzerer Zeit behandeln – effizient für Ihr Beauty Center, angenehm für Ihre Kund/innen.

Variable Impulslängen

Im Automatik-Modus Impulslängen von 8 ms möglich oder je nach Einstellung 30 ms, 100 ms und 400 ms, sodass pro Puls in sehr kurzer Zeit die gesamte Energie auf das Follikel abgegeben wird.

Sanfte Behandlung

Die Laserspitze bleibt während der gesamten Behandlung konstant auf 0 °C gekühlt. Das schützt die Haut, reduziert Schmerzempfinden und sorgt für eine angenehme Anwendung – selbst bei sensiblen Kund/innen.

Für alle Hauttypen

Dank der anpassbaren Impulsdauer passt sich der Laser individuell an Haut- und Haartyp an und ermöglicht effektive Behandlungen ohne Kompromisse. Ob helle Haut, gebräunte Haut oder dunkler Hauttyp – Leaseir liefert sichtbare Ergebnisse mit höchster Sicherheit.

Alles Wichtige auf einen Blick

15 Zoll Touchscreen entspiegelt, auch mit Gummihandschuhen zu bedienen. Der Leaseir Laser verfügt über eine moderne einfache und übersichtliche Bedienoberfläche, mit der Sie leicht arbeiten können. Alle für die Sitzung relevanten Einstellungen und Parameter sind auf einem Screen zu sehen.

Alle Wellenlängen

Neben dem bewährten 810 nm-Standard bietet Leaseir auch ein 3-Wellenlängen-Handstück (Blend). So können alle Haut- und Haartypen optimal behandelt werden – flexibel und zukunftssicher.

HOHE RENTABILITÄT


Rechnet sich schon nach 5 Behandlungen

Fünf komplette Beinthaarungen à CHF 220.– reichen aus, um – bei einer Laufzeit von 48 Monaten – die monatliche Brutto-Leasingrate* für den Leaseir Diodenlaser zu finanzieren. Das lässt sich in jedem Institut darstellen. Eine Investition, die sich lohnt!

Holt Kunden regelmäßig in Ihr Institut

Um Haare dauerhaft zu entfernen, sind wegen der unterschiedlichen Haarwachstumsphasen 6 bis 10 Behandlungen nötig. Jeder Kunde kommt also mehrfach zu Ihnen – die ideale Basis für eine langfristige Kundenbindung, weitere Angebote oder die Enthaarung weiterer Körperbereiche.

*Beispielrechnung auf Basis des Brutto-Kaufpreises für den Leaseir Single inkl. Lieferung und Einschulung

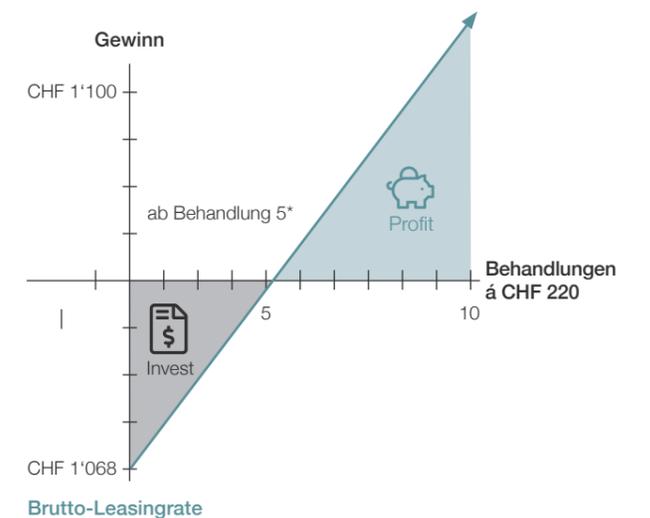

UNGEFÄHRE BEHANDLUNGSZEIT FÜR BEIDE BEINE (5.000 CM²)



HANDSTÜCK	SINGLE	DUAL	QUAD
Spotgröße	1,2 cm ²	2 cm ²	3,7 cm ²
Wiederholungsfrequenz mit 4 Hz	4,8 cm ²	8,1 cm ²	14,8 cm ²
Effektive Behandlungszeit	17 min	10 min	6 min
Totale Zeit (inkl. Vor-/Nachbehandlung)	25-30 min	15-20 min	10-15 min

BEHANDLUNG

Anzahl nötig zur Finanzierung der monatlichen Leasingrate (CHF 1'068.– / Monat netto)

Ganzkörper	á CHF 390.– / 60 min	nur 3 Ganzkörperbehandlungen (~ nur 3 Std. Aufwand insgesamt)
Bikinizone	á CHF 120.– / 15 min	nur 9 Bikinizonen-Behandlungen (~ nur 2,5 Std. Aufwand insgesamt)
Beine	á CHF 220.– / 30 in	nur 5 Beinbehandlungen (~ nur 2,5 Std. Aufwand insgesamt)
Achseln	á CHF 90.– / 5 min	nur 12 Achselbehandlungen (~ nur 1 Std. Aufwand insgesamt)